



**vinhy®**  
Keep moving forward



# HIERA

## Triệt Lông Diode Laser

- **FHR:** triệt lông nhanh
- **HR:** triệt lông cho nam và nữ
- **SR:** trẻ hóa da


Công nghệ: SLD, 800W, bảo hành 20 triệu shots hoặc 1 năm

**KFDA**  
KFDA CHỨNG NHẬN



MADE IN  
KOREA



## Diode laser với bước sóng 808nm tốt nhất cho triệt lông

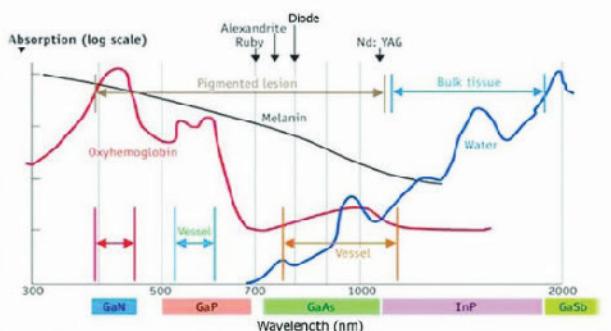

## Vòng đời của lông

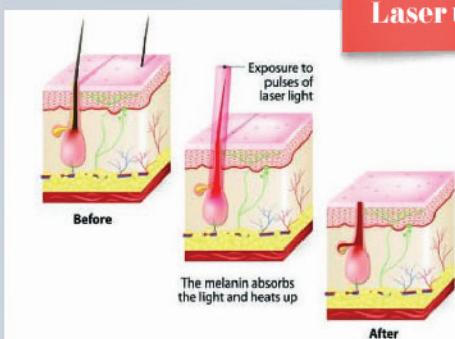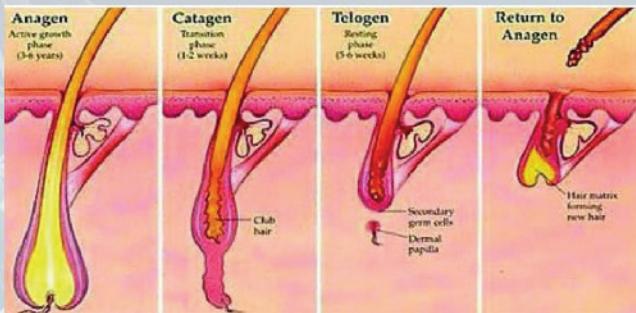

## Laser triệt lông

### Nguyên Lý Điều Trị

Laser 808nm được hấp thu có chọn lọc bởi melanin trong nang lông và phá hủy nó, ức chế tế bào mầm lông mọc lại, nang lông trải qua 3 giai đoạn anagen, catagen và telogen vì thế cần 1 số lần điều trị



## HERA, công nghệ diode laser triệt lông thế hệ mới.

Thanh diode laser công nghệ mới - công nghệ SLD laser (phát tia bề mặt) với tuổi thọ laser dài, năng lượng ổn định và tăng đáp ứng nhiệt lên tới 80 độ C

- Tuổi thọ laser: 20 triệu shots
- Công suất cao: 800w
- Điều trị nhanh: 10hz
- Mật độ Tia laser đồng đều cho triệt lông hiệu quả cao
- Điều trị lông an toàn với bước sóng 808nm được hấp thu cao bởi melanin nang lông
- Hệ thống làm lạnh da tiếp xúc: double TEC + làm lạnh bằng sapphire
- Diode laser có thể được sử dụng cho da trắng đến nâu có lông màu đen

## Các bước điều trị

- Bước 1: Test
- Bước 2: Cạo lông
- Bước 3: Thoa gel siêu âm
- Bước 4: Điều trị
- Bước 5: Chăm sóc da sau laser

## Thời gian điều trị

- 20 phút cho mặt và 5 phút cho nách
- 15 phút cho bikini, hoặc cho chân hoặc cho lưng
- 45'-1 giờ: cho vùng rộng lớn
- Số lần điều trị: 4-6 lần cách nhau 4 tuần
- Số lần điều trị thực tế tùy loại da, màu da và phát triển của lông





## Triệt lông hiệu quả bằng công nghệ hera diode laser

**HERA diode Laser** là giải pháp triệt sạch chân lông nhanh chóng hiệu quả đến từ Hàn Quốc, ngăn chặn tái phát, cho vùng da điều trị đều màu, sáng mịn, nữ tính chỉ sau 1 liệu trình. Thời gian ngắn – Không xâm lấn – Không tổn thương – Không đau rát.

### Lông trên da được triệt như thế nào?

Lông phát triển trải qua 3 giai đoạn: phát triển & trưởng thành, nghỉ ngơi và sau đó rụng đi, tại nang lông có chứa các tế bào mầm lông sẽ mọc ra 1 lông mới. Đặc tính của lông ở giai đoạn phát triển & trưởng thành chứa rất nhiều tế bào sắc tố (melanin) màu đen trong nang lông và rất dễ bắt sáng.

Công nghệ triệt lông **HERA DIODE LASER** có tại **VIN HY**

Sử dụng ánh sáng diode laser công suất cao (800W) đánh thẳng vào nang lông, hắc tố có trong nang lông bắt sáng và làm cho nang lông nóng lên, làm các tế bào mầm xung quanh nang lông bị tổn thương nhiệt và không mọc lại được và nang lông cũng bị teo lại và rụng đi. Kết quả là làn da mịn màng, không lông & tươi sáng..

Bên cạnh đó, ánh sáng diode Laser cũng đánh bay các hắc sắc tố da, giúp da xóa bỏ vết thâm đen và trắng sáng dần lên từ bên trong.

### Hình trước sau



Trước



Sau



Trước



Sau



Trước



Sau



Trước



Sau



Trước



Sau



Trước



Sau

# HERA

## Thông số kỹ thuật



<b>Chế Độ Mở</b>	FHR: triệt lông nhanh HR: triệt lông cho nam và nữ Chế độ cài sẵn để xử lý nhanh SR: trẻ hóa da
<b>Loại Laser</b>	CW GAAIAS DIODE LASER
<b>Công Suất</b>	800 Watt
<b>Bước Sóng</b>	808nm
<b>Công Nghệ Laser</b>	SLD tuổi thọ laser dài, năng lượng ổn định, đáp ứng nhiệt lên tới 80 độ c
<b>Tần Số</b>	1-10Hz
<b>Độ Dài Xung</b>	5-200ms
<b>Spotsize</b>	10 x 9cm
<b>Làm Lạnh Da</b>	Tiếp xúc (có sẵn trên máy)
<b>Điện Áp</b>	220V, 50 - 60 Hz
<b>Kích Thước</b>	40x41x100 (WxDxH)
<b>Trọng Lượng</b>	30Kg



Tay cầm 800 Watt SLD



SLD LD



Normal line LD

**Korea Meditech Co., Ltd.**

#A-2002, 606 Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,  
Seoul, Korea  
Tel: +82-24640073  
<https://www.kormeditech.com>  
Email: [sales@koreameditech.com](mailto:sales@koreameditech.com)  
Call skype: salesmeditech



**vinhy**<sup>®</sup>  
Keep moving forward

**ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM**

Lầu 11, 538 CMT8, P.11, Q.3, Tp.HCM  
Tel: (028) 3846 4480 - Hotline: 0911 714 898  
Email: [info@vinhy.com](mailto:info@vinhy.com)

[www.vinhy.com](http://www.vinhy.com)