



UltraDuo

DA THẨM MỸ

W: xóa nhăn, DW: xóa nhăn sâu

SR: trẻ hóa da, ST: săn chắc da...

AA: chống lão hóa, lỗ chân lông to

P: đưa thuốc vào da

DA LIỄU

AC: mụn viêm, AP: mụn mủ

AD: viêm da kích ứng

PD: viêm môi, E: chàm (eczema)

AS: sẹo mụn, HS/K: sẹo lồi, phì đại

CLU: nấm da, LE: lupus ban đỏ

HEALUX
H E A L U X



UltraDuo




ULTRADUO

là dòng máy
thẩm mỹ công
nghệ siêu âm
tần số kép ứng
dụng trong
điều trị da thẩm
mỹ và da liễu

HEALUX
H E A L U X

UltraDuo

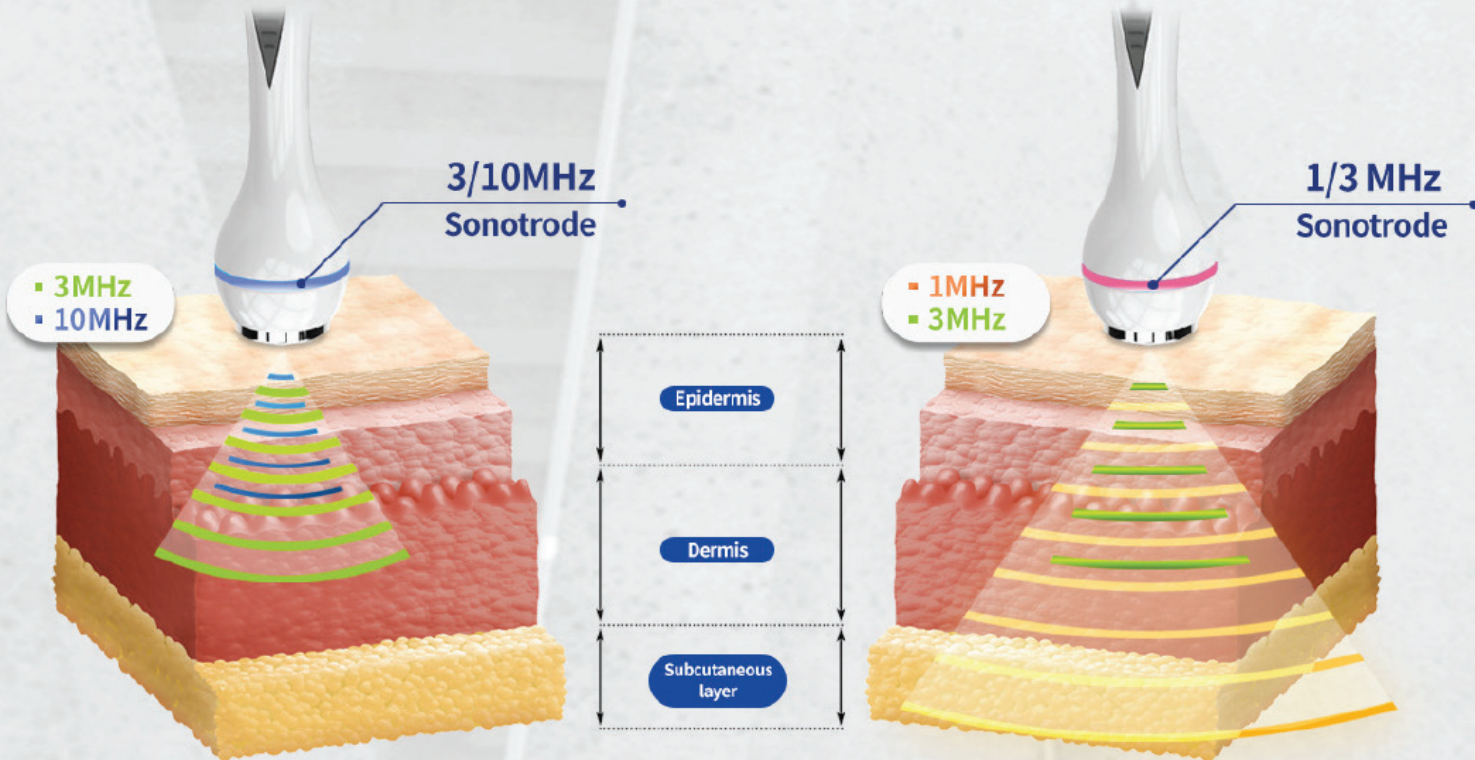


ULTRADUO là 1 công nghệ sóng siêu âm tần số kép với nhiều tần số khác nhau lên đến 10 MHz trong 1 đầu Probe, luân phiên giữa hai tần số lên đến 500 lần mỗi giây. Đó là sự kết hợp tần số 1 MHz và 3 MHz trong đầu Pink Probe và tần số 3 MHz và 10 MHz trong đầu Blue Probe.

HEALUX
H E A L U X



CÔNG NGHỆ ULTRADUO SIÊU ÂM TẦN SỐ KÉP TÁC ĐỘNG LÊN DA NHƯ THẾ NÀO?


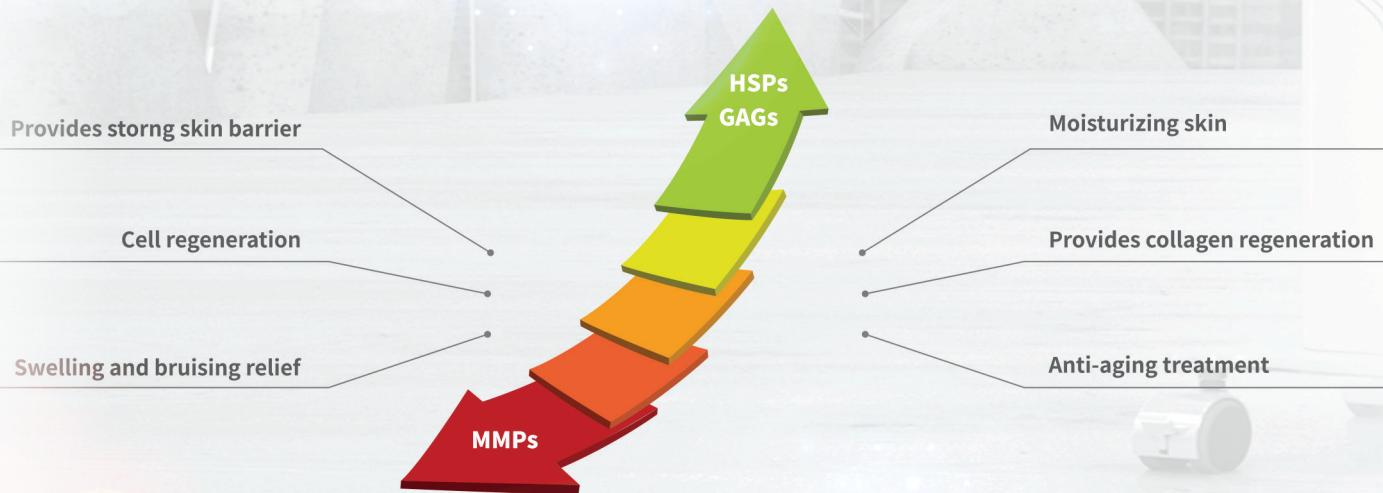


Sự kết hợp các tần số siêu âm khác nhau của công nghệ ULTRADUO® có thể giúp da tự điều chỉnh cấu trúc mô liên kết. Chúng tác động làm giảm hoạt động của proteolytic enzyme (MMPs) là enzyme chịu trách nhiệm cho suy tàn của mô liên kết, đồng thời cũng tác động đến tăng sự hình thành của các protein sốc nhiệt (HSPs) và các hydrophilic polysaccharides (GAGs) cần thiết cho việc tăng sinh sợi collagen và tăng độ ẩm của da bằng cách tăng hàm lượng hyaluronic acid (HA) trong da.

HEALUX
H E A L U X

UltraDuo

TRƯỚC VÀ SAU

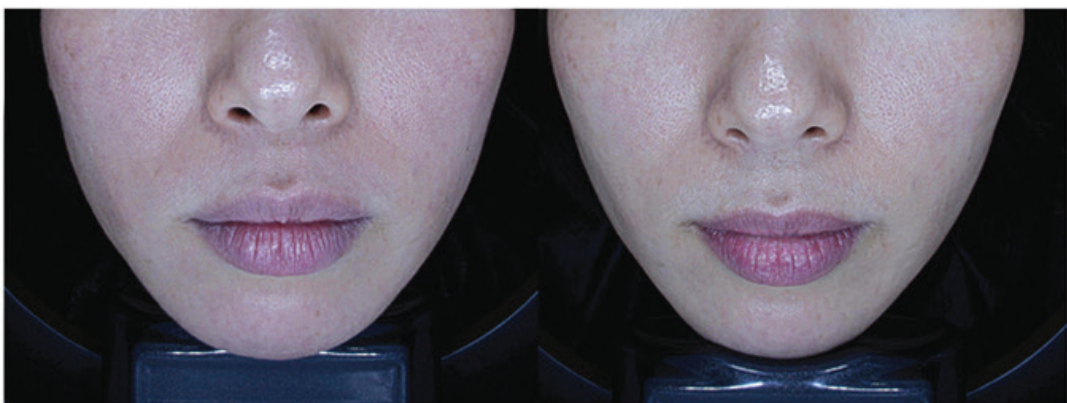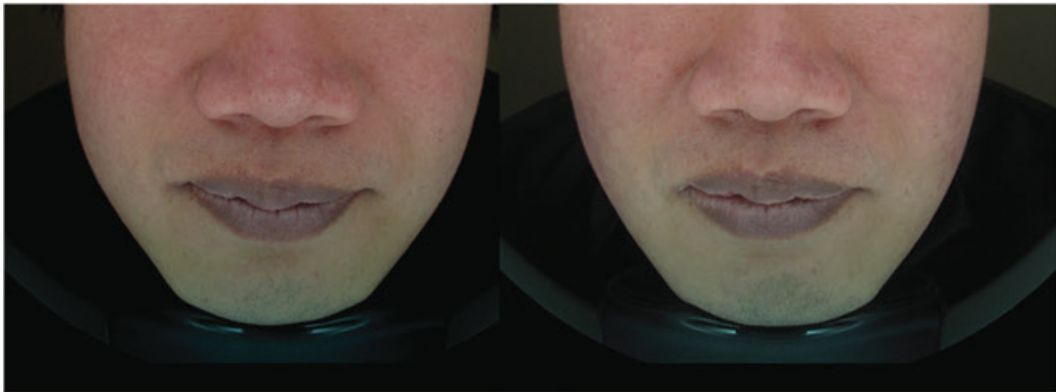

HEALUX
H E A L U X

UltraDuo

Thông số kỹ thuật

Tần số sóng siêu âm	Mật độ công suất (Watt/cm ²)	Đầu điều trị	Công suất tiêu thụ điện	Kích thước
1MHz, 3MHz, 10MHz	3 W/cm ² ± 20%	Pink Probe – 1/3MHz Blue Probe – 3/10MHz Tổng cộng: 2 đầu	100VA	250 x 350 x 405(mm) (W x H x D) (Trọng lượng: 8KG)

HEALUX
H E A L U X



ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM:

Lầu 11, 538 CMT8, P.11, Q.3, Tp.HCM
Tel: (028) 3846 4480 - Hotline: 0962 977 038
Email: info@vinhy.com

www.vinhy.com